



VOLG TRENDS EN BEKIJK DE VOORUITGANG IN DE TIJD


Volg de huidverzorgingstrends van uw klant op in de loop van de tijd
Vergelijk afbeeldingen van de huid voor en na de behandeling

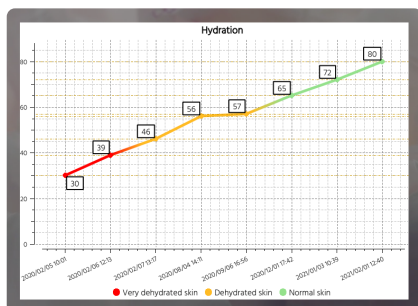


Hydratatie

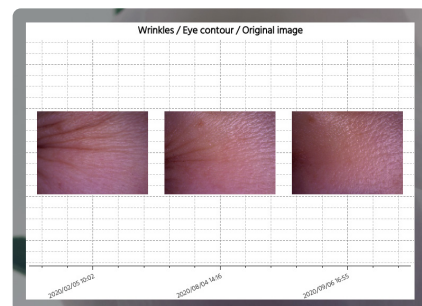

Rimpels / oogcontour

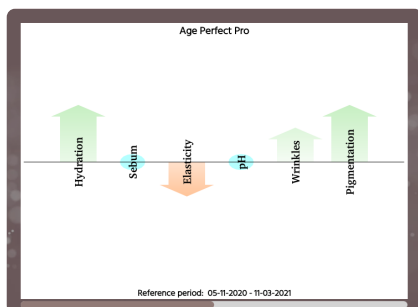

Age Perfect Pro

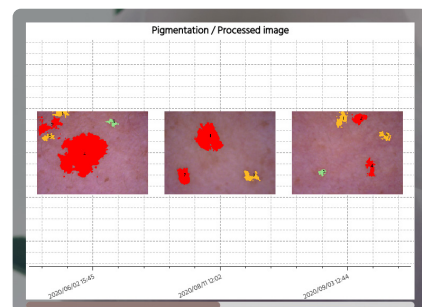

Pigmentatie

OP MAAT AANBEVELING EXCLUSIEVE FUNCTIE

Ontwikkel unieke programma's voor de huid, het haar of het lichaam met de Soft FX op basis van de huidverzorgingsbehoeften van uw klant en de aangeboden behandelingen/producten.

WORD NU ZELF EEN HUIDANALYSE-EXPERT!



Innovatie en uitmuntendheid vertalen zich in Soft FX, het exclusieve apparaat voor de analyse van huid en haar, ontworpen voor schoonheids- en anti-verouderingsexperts.

ANUBIS
care

TECHNISCHE KENMERKEN

Soft
FX

DISPLAY	TFT 10.1" met capacitief multitouchscreen		
FULL-FACE CAMERA	Max resolutie : 5 MP - 2592x1944 Auto-focus Beeldhoek: 60° c		
VERBINDING	Ethernet, wifi en wifi-hotspot Bluetooth Low Energy voor communicatie met de sondes		
INTERN GEHEUGEN	4GB		
EXTERNE MONITOR	HDMI		
INTERFACE	2xUSB		
GEWICHT	3 Kg		
AFMETINGEN	310 (w) x 170 (d) x 225 (h) mm		
VOEDING	12V DC - 5 A		
ENERGETISCHE ABSORPTIE	Max. 60 Watt		
WERKCONDITIES	Temperatuur 15 - 30° C (relatieve vochtigheidsgraad: 5-85% niet-condenserend)		
OPSLAGCONDITIES	Temperatuur 0 - 50° C (relatieve vochtigheidsgraad: 5-85% niet-condenserend)		
CERTIFICATEN	CE-markering		
CERTIFICATEN	MET-markering		
	MEETPRINCIPE	VELD	RESOLUTIE
HYDRATATIE (MEL-HYD FX)	Capacitief	0-100 a.e.	1 a.e.
MELANINE (MEL-HYD FX)	Reflectiefotometrie op 2 golflengten (λ1=875nm, λ2=660nm)	0-100 a.e.	1 a.e.
pH (pH FX)	pH-gevoelige glaselektrode	2-10	0.1
SEBUM (TAPE FX)	Computer vision	0-100 a.e.	1 a.e.
ELASTICITEIT (ELA FX)	Stress/vervorming	0-100 a.e.	1 a.e.
	BEELD SENSOR	VERGROTING	RESOLUTIE
MICROCAMERA (CAM FX)	CMOS ¼ VGA-kleursor	Type lens en vergroting : 100X et 400X	1.3 MP - 1280x1024

Donksesteenweg 212, 2930 Brasschaat (Antwerpen)
T. +32(0)36473612 E. info@anubiscare.be

ANUBIS
care

Soft
FX

REVOLUTIONAIRE
HUIDANALYSE TECHNOLOGIE
VOOR ADVIES OP MAAT

ANUBIS
care

REVOLUTIONAIRE HUIDANALYSE TECHNOLOGIE BINNEN HANDBEREIK

Ontdek het exclusieve Soft FX-huidanalysesysteem dat voor alle huidverzorgers ontworpen is om hun esthetische activiteiten te ondersteunen en hun professionaliteit te vergroten.

Het identificeren van huidverzorgingsproblemen en het volgen van de voortgang zijn essentieel voor het opstellen van een huidverzorgingsplan voor uw klanten en voor op maat advies in de loop van de tijd.

Het Soft FX toestel biedt een verscheidenheid van exclusieve functies die aan de behoeften van professionals voldoen, waaronder de nieuwste analyseoplossingen, de aanbevelingen voor verschillende delen van het lichaam, de vergelijking van resultaten, de afbeeldingen voor en na de behandelingen en het e-mailen van de rapporten.

EXCLUSIEVE HUIDANALYSE VOOR MEERDERE TOEPASSINGEN

De sonden meten de huid om de belangrijkste problemen op het gebied van huidverzorging te identificeren. Gewoon drukken op de huid om de resultaten te bekijken van:

- Hydratatie
- Elasticiteit
- Melanine
- Sebum
- pH



Soft FX

Compact en ergonomisch ontwerp
310 (b) x170 (d) x225 (h) mm 3kg


10.1 Touch screen met volledige hoek
Met afbeeldingen in hoge resolutie

Digitale communicatie
Bekijk de resultaten van de analyse waar u maar wilt: smartphone, tablet of via e-mail

De resultaten
ze vervangen subjectieve interpretatie

Commentaar en suggesties
ze ondersteunen de esthetische evaluatie


Persoonlijk advies
van producten en behandelingen

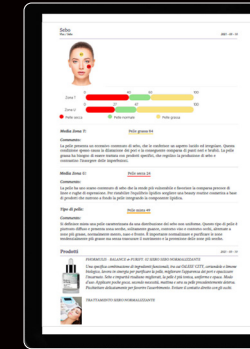


Full-face camera aan de voorkant
Bekijk het analyseresultaat direct op de foto van de klant

Microcamera
Voor vergroting en visuele analyse van rimpels, pigmentatietexturen, poriën, keratine, roodheid, haarstructuur, haardichtheid, haardiameter en roos


Draadloze sonden
Magnetisch behuizingssysteem en automatisch opladen. Voor het meten van hydratatie, melanine, elasticiteit en pH

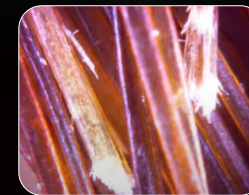

Haarstructuur

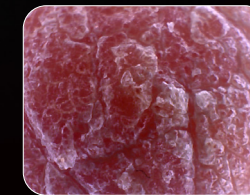

Keratine

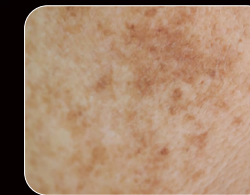

Pigmentatie

AANBEVELINGEN

De aanbevelingen zijn zeer gebruikersvriendelijk, volledig begeleide beoordelingen, waarbij de sonden en/of visuele beeldvorming met de camera worden gebruikt, die een ongeëvenaarde huidanalyse van verschillende delen van het lichaam opleveren.



Huid



Check Up

Ontwikkeld om de belangrijkste problemen van de huid te identificeren en te beoordelen, waaronder pH-, hydratatie-, sebum- en elasticiteitsniveaus. Een "must" voor een eerste analyse van de huid.

Check Up Pro

Zoals hierboven. Bevat ook HD visuele weergave van de huid met de camera. Parameters zoals de lengte en diepte van een rimpel zijn hierdoor meetbaar.

Fototype

Classificeert het huidtype in termen van reactie op blootstelling aan ultraviolette straling (UVR).

Age Perfect

Identificeert de belangrijkste tekens van huidveroudering, waaronder elasticiteit, sebum, melanine uniformiteit en hydratatie-niveaus, zodat u de verzorging die nodig is kunt leveren.

Age Perfect Pro

Zoals hierboven. Bevat ook HD visuele weergave van de huid met de camera.

Zonnebescherming

Ontwikkeld om de zonnebescherming voor elk huidtype aan te bevelen op basis van het fototype en de blootstellingscondities.

Purit.y

Voor een onzuivere huid die vaak een onevenwichtige olie- en vochtmantel heeft die tot een gevoelige huid leidt.

Sensit.y

Deze huidcontrole beoordeelt de parameters die essentieel zijn om de gevoeligheid van de huid te begrijpen en wat eraan te doen.

Illumin.y

Op zoek naar een stralende, helderdere en gelijkmatige huid? Dit consult beoordeelt verschillende parameters, waaronder melanine, huidtextuur en het aantal dode huidcellen.



HAAR

Focus Hoofdhuid

Goed haar begint bij een gezonde hoofdhuid. Dit is een grondige beoordeling van de hoofdhuid waarop u uw aanbevelingen kunt baseren.



DECOLLETÉ

Decolleté Expert

Een uniek advies beoordeelt de huid van het delicate gebied van het décolleté dat onderhevig is aan veroudering en verlies van toon.



HANDEN

Schoonheid Handen

Handen vertonen de eerste tekens van veroudering. Dit programma richt zich op huidveroudering en gevoeligheid.